


► **DRILLED END NEEDLE**

It has no crevasses, is seamless & does not cause any tissue tear.

Terminación torneada de la aguja

No tiene fisuras, ni uniones por lo que no produce ningún desgarramiento del tejido.

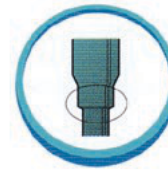

Drilled
Unión



Channel Needle
Canal de unión

► **STRONGER NEEDLE**

Made from special stainless steel alloy – provides excellent ductility & high resistance to needle breaking even when reshaping.

Alta resistencia

Hecha de una especial aleación de acero inoxidable, provee excelente docilidad y alta resistencia a quebrarse, aún cuando sea mal empleada.



Needle Compressed to
85% of its chord length.
La aguja se comprime hasta
el 85% del ancho del hilo




Needle returns
to original shape.
La aguja vuelve
a su forma original.

► **SMOOTH FINISH FOR EASY PASSAGE THROUGH TISSUES**


Smooth and excellent finish with virtually no pit marks eliminates tissue drag.

Suave terminación para una fácil penetración del tejido

La suave y excelente terminación, prácticamente no deja marcas, eliminando el desgarramiento de tejido.

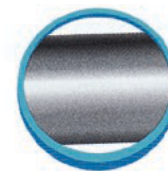

Our sutures
Nuestras suturas

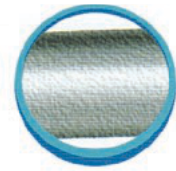

Others
Otras

► **SUPERIOR GEOMETRY PENETRATION FOR CUTTING NEEDLES**

The sharpened triangular sides of the cutting & reverse cutting needles along with the sharp tip penetrates tough tissue easily.

Penetración geométrica superior para agujas cortantes

Los afilados lados triangulares, a lo largo de la punta de las agujas cortantes y reverso cortantes, penetran fácilmente el tejido.



► **BLACK & SILICONIZED NEEDLES**

Black siliconized needles provide glare free vision for surgeons during procedures & passes easily through tissues.

Agujas negras y siliconadas

Las agujas siliconadas negras, aseguran al cirujano una visión libre de resplandores durante los procedimientos médicos y atraviesan con mayor facilidad el tejido.



► **RIBBED NEEDLE FOR BETTER GRIP**

Ribbed needles ensure better grip in needle holder without twisting or turning & adds to penetration strength.

Aguja acanalada para mejor agarre

La aguja acanalada asegura mejor agarre en los porta aguja, evitando que se tuerza o de vuelta y añade fuerza de penetración.




► **SUPERIOR SUTURE – NEEDLE ATTACHMENT**

The precision of the drilled needle attachment offers a superior suture which provides strength for trouble free suturing.

Sutura superior – unión de la aguja

La precisión del torneado del punto de unión de la aguja, ofrece una sutura superior libre de problemas.

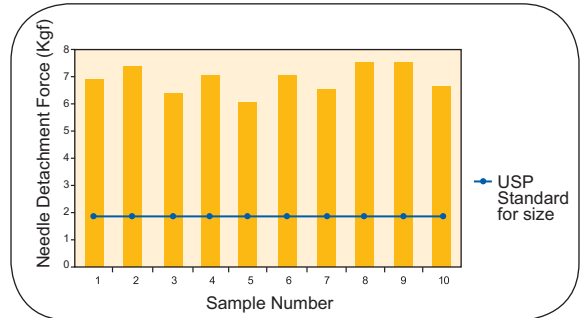


► **HIGHER ATTACHMENT PRODUCTIVITY**

Initial 0.1mm of the needles counter sunk for easy insertion of suture into needle offering high productivity.

Alta productividad de la unión

El contador inicial de 0.1mm de profundidad de las agujas, permite una fácil inserción de la sutura en la aguja, ofreciendo alta productividad.

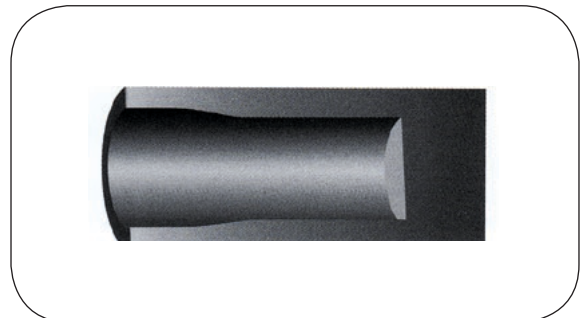

► **SHARPENED NEEDLE**

The sharp and gradually tapered needle profile guarantees easy penetration at every point.

Filo de la aguja

El filo y la gradual disminución del grosor de la aguja, garantizan una fácil penetración en cada punto.

